



НОВИНКА!

Constic

Большее-меньшим.

Новый текучий композит 3-в-1: протравливание, бондинг и реставрация в один этап.

БОЛЬШЕЕ-МЕНЬШИМ.

Попробуйте самопротравливающий, самоадгезивный текучий композит от DMG – Constic. Новый текучий композит 3-в-1 объединяет протравливающий гель, адгезив и текучий композит в одном материале.

Это помогает избавиться от лишних этапов в работе и повысить безопасность во время применения.

Вкратце: с Constic быстрее, проще и безопаснее.

Начните использовать новый текучий композит 3-в-1 уже сейчас!



Доступен в 6 оттенках:
A1, A2, A3, A3.5, B1, белый opak

Основные показания к применению Constic:

- Небольшие реставрации I и III классов
- Реставрации V класса
- Герметизация фиссур
- Герметизация протяжённых фиссур
- Прокладки для полостей I и II классов
- Блокирование и заполнение поднутрений в полостях
- Небольшие полости на окклюзионных поверхностях молочных зубов

Преимущества:


- самопротравливающий и самоадгезивный материал
- более быстрая, лёгкая и эффективная процедура лечения
- рентгеноконтрастность и флюоресценция близка к естественным зубам
- предотвращение постоперативной чувствительности
- минимизирует потенциальные источники ошибок



Исходная ситуация: пломба из амальгамы на окклюзионной поверхности зуба 17.



Внесение Constic с помощью кисточки.

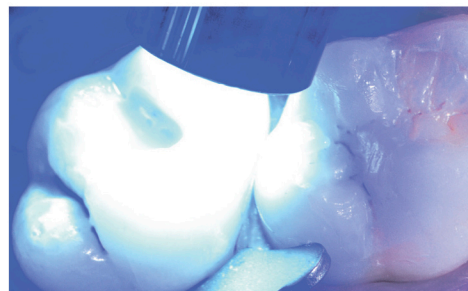

Световая полимеризация.



Проверка окклюзии.

Самоадгезия: высокие технологии, простота в обращении.

Надёжная адгезия без использования других материалов является непростой задачей для композита. Обычно для этого требуются специальные адгезивные молекулы, такие как в Constic. На основе успешных адгезивных систем были разработаны молекулы, которые могут протравливать эмаль и дентин, сцепляться с ними подобно стеклоиономеру, а также сополимеризоваться с композитом. Для облегчения сцепления молекул рекомендуется тщательно втирать Constic. Самонейтрализующиеся кислотные группы затем вступают в реакцию с увлажненной эмалью и дентином, образуя прочное химическое сцепление, как в естественном зубе.

Обратите внимание:

Ввиду того что активные молекулы в материале должны быть постоянно готовы к реакции, важно держать Constic в холоде.

Надёжная, научно доказанная адгезия.

Измерения прочности на сдвиг, проведённые в исследовании С. А. Муњос-Виверос в Государственном университете штата Нью-Йорк в Буффало*, демонстрируют очень хорошие результаты для Constic на эмали и дентине. Значения прочности адгезии у Constic превышают значения других самопротравливающих, самоадгезивных текучих композитов, протестированных в рамках исследования.

Constic достигает очень хороших результатов на эмали и на дентине по сравнению с традиционными текучими композитами, применяемыми с отдельными адгезивными системами. Отсутствуют существенные различия между этими группами.


Примечательно, что Constic достигает практически одинаково хороших значений прочности адгезии на эмали и дентине. У конкурирующих самоадгезивных продуктов эти значения существенно различаются.

Простота применения, эффективное действие.


Протравливание, бондинг и пломбирование в один этап: это экономит время и деньги и минимизирует потенциальные источники ошибок. Кроме того, самопротравливающий, самоадгезивный Constic обеспечивает снижение постоперационной чувствительности. Конусообразная “защёлкивающаяся кисточка” DMG помогает достичь даже глубоких фиссур.

*Источник: Muњoz-Viveros CA (2012); Data on file, DMG, Hamburg, Germany

Прочность на сдвиг на дентине*

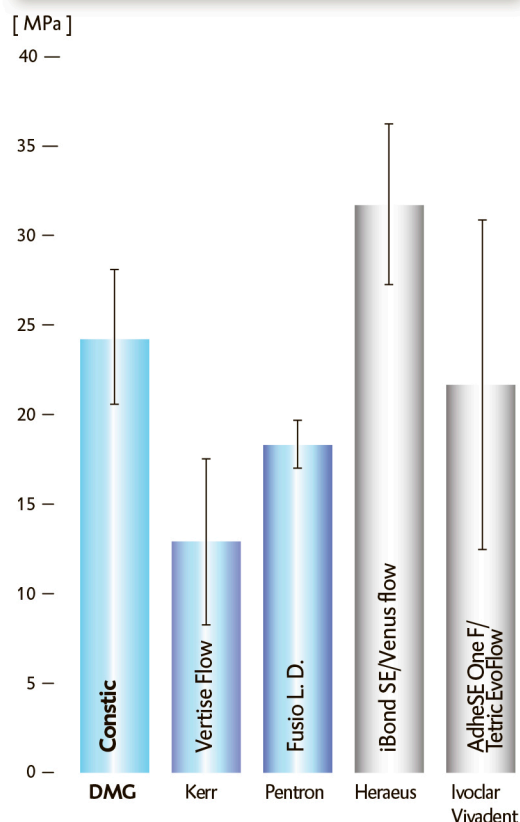

Прочность на сдвиг на эмали*

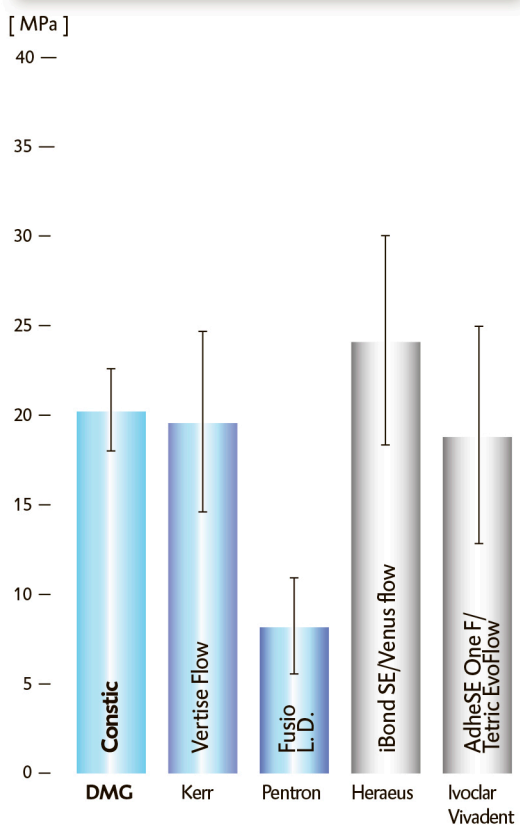

УПАКОВКА

Constic

Упаковка:	2 шприца @ 2 г композита	
	1 держатель для кисточки	
	20 защёлкивающихся кисточек	
	20 Luer-Lock-Tips Silver	
	Оттенок A1	REF 220700
	Оттенок A2	REF 220701
	Оттенок A3	REF 220702
	Оттенок A3.5	REF 220703
	Оттенок B1	REF 220704
	Оттенок белый opak	REF 220705
Аксессуары:	20 защёлкивающихся кисточек	
	20 Luer-Lock-Tips Silver	REF 220712



Для композитных реставраций, требующих адгезива, компания DMG рекомендует:

TECO

Упаковка:	60 SilvR dose @ 0,12 мл Bond	
	1 шприц @ 2 мл Etching Gel	
	3 Luer-Lock-Tips White	REF 213320
	1 флакон @ 5 мл Bond	
	1 шприц @ 2 мл Etching Gel	
	25 белые одноразовые браши	
	3 Luer-Lock-Tips White	
	1 блок для замешивания	REF 213321



EcuSphere-Carat

Упаковка:	1 шприц @ 3 г	
	Оттенок A1	REF 220287
	Оттенок A2	REF 220267
	Оттенок A3	REF 220285
	Оттенок A3.5	REF 220266
	20 Safetips @ 0,3 г	
	Оттенок A1	REF 220323
	Оттенок A2	REF 220271
	Оттенок A3	REF 220322
	Оттенок A3.5	REF 220270
Аксессуары:	1 Диспенсор Safetip-Dispenser	REF 213122
	1 LuxaTray	REF 213014
	50 Белые насадки Luer-Lock-Tips	REF 109942
	25 белые одноразовые браши	REF 109320



БЕЛОМНИМЕД
ГРУППА КОМПАНИЙ

Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь
УП "Фармакорс"

г. Минск, 1-й Твердый переулок, 5-100
тел. 8017 2853444, 8017 2948511
факс 8017 2100522
info@belomnimed.by
www.belomnimed.by
belomnimed.deal.by

DMG
Dental Milestones Guaranteed