

FL-BOND II

Самопротравливающая,
выделяющая фтор адгезивная система



PRG
Technology
Giomer



FL-BOND II

FL-BOND II - самопротравливающая, выделяющая фтор двухэтапная бондинговая система, которая обеспечивает высокую адгезию к эмали и дентину и надежное краевое запечатывание.

Система характеризуется превосходными рабочими характеристиками и биосовместимостью.

Шаг 1 - Прайминг

Праймер FL-BOND II содержит новый эффективный активирующий адгезию мономер и новый фото-активатор. Праймер не содержит НЕМА и ацетон, что минимизирует запах, исключает постоперативную чувствительность и побеление края десны.

Самопротравливающий праймер FL-BOND II подготавливает поверхность эмали и дентина для бондинга без отдельного этапа протравливания.

Показания

- Адгезия любого композита к тканям зуба
- Подготовка тканей зуба перед нанесением композитных цемента
- Восстановление реставраций

Шаг 2 - Бондинг


Бондинговый агент FL-BOND II включает наполнитель S-PRG (поверхностная предварительная реакция стеклоиономера), который постоянно выделяет фтор в ткани зуба.

Благодаря высокому содержанию наполнителя FL-BOND II обеспечивает высокую устойчивость к истиранию и эффективно предотвращает краевое вымывание материала за счет надежного запечатывания.




Комфортное и быстрое применение


Применение включает 2 простых шага и занимает около 35 секунд, потому что нет необходимости в сложных и чувствительных к технике этапах, таких как протравливание, смешивание или контроль влажности.

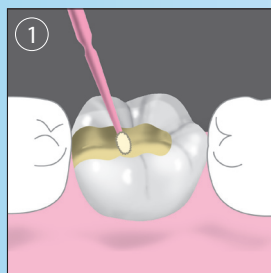


Нанесите праймер на эмаль и дентин и оставьте на 10 секунд

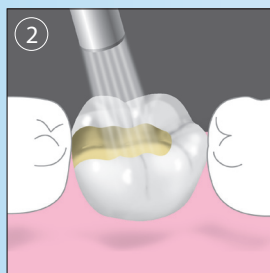

Высушите безмасляным воздухом (не промывайте водой)

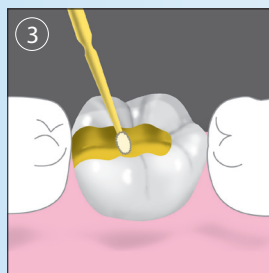

Равномерно нанесите бондинговый агент на всю полость

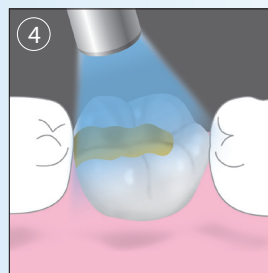


Полимеризуйте светом: 10 сек. светом галогеновой лампы или 5 сек. светом лампы LED


Оптимальная вязкость и адгезия

Улучшенная вязкая консистенция FL-BOND II делает применение более удобным и исключает стекание адгезива со стенок на дно полости. Это гарантирует одинаковую толщину адгезива на всей препарированной поверхности и стабильную силу адгезии.

Низкая вязкость
(другой бондинговый агент)

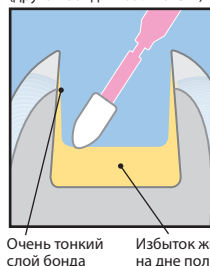


Улучшенная вязкость
(FL-BOND II)

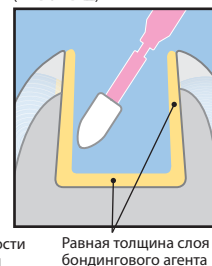

Рентгеноконтрастность для адекватной диагностики

Для лучшей диагностики FL-BOND II обладает выраженной рентгеноконтрастностью, что обеспечивает прекрасную визуализацию реставрации и слоя адгезива на рентгенограмме.

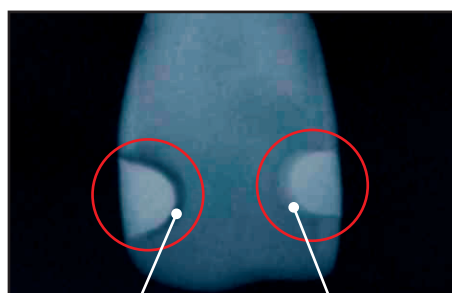


Обычная
адгезивная
система

FL-BOND II

Длительная защита

Бондинговый агент FL-BOND II содержит 40% накапливающего и выделяющего фтор S-PRG наполнителя. Это обеспечивает постоянную дополнительную защиту от вторичного кариеса благодаря оптимальной реминерализации тканей зуба.¹

Выделение фтора в $\mu\text{g} / \text{cm}^2$

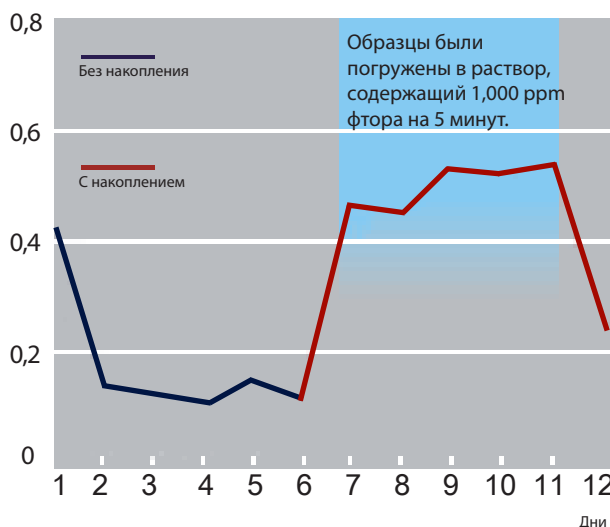


Накопление и выделение фтора FL-BOND II


Надежная сила адгезии

Добавление улучшенного адгезивного мономера и нового фотоактиватора обеспечивает FL-BOND II надежный бондинг к эмали и дентину. Праймер, не содержащий НЕМА, предотвращает снижение силы адгезии, вызванное гидролизом, поэтому обеспечивается стабильный бондинг в течение длительного времени.

Начальная сила адгезии
(через 24 часа)

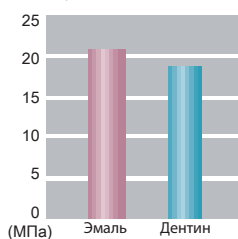

Устойчивость адгезии
(после 2,000 термических циклов)

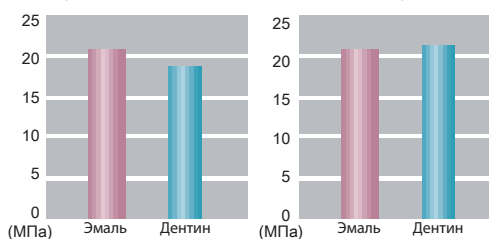

¹ Gordan V.V., Mondragon E., Watson R.E., Garvan C., Mjör I. A.: А Клинические исследования самопротравливающего праймера и реставрационного материала класса гиомер. Результаты 8-ми летнего исследования. J Am Dent Assoc 138: 621-627 (2007)

Информация для заказа



- FL-BOND II Набор**
 – Праймер 5 мл
 – Бондинговый агент 5 мл
 – Микрокисти розовые и желтые по 25 шт.
 – 1 палетка, 1 пластиковая крышка для палетки
 PN 1306

- FL-BOND II**
 – Праймер 5 мл
 PN 1307



- FL-BOND II**
 – Бондинговый агент 5 мл
 PN 1308

- FL-BOND II**
 – Протравка 6 мл
 PN 1309

Реставрационный композит Beautifil II прекрасно сочетается с FL-BOND II и демонстрирует высокие эстетические качества и превосходные рабочие характеристики. При сочетании с FL-BOND II усиливается выделение фтора.



- BEAUTIFIL II Шестицветный набор**
 PN 1775

- BEAUTIFIL II Шестицветный набор, в капсулах**
 PN 1776

- BEAUTIFIL II Косметический набор**
 PN 1777

- BEAUTIFIL II Трехцветный набор, в капсулах**
 PN 1778



Официальный дистрибьютор компании SHOFU в Республике Беларусь
УП "Фармакорс"
 1-й Твердый переулок, 5-100, 220037 Минск
 тел. (017) 2948511, (017) 2853444, факс (017) 2100522, e-mail: info@belomnimed.by
<http://belomnimed.by>