

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Один из самых твердых материалов для регистрации прикуса среди А-силиконов	> Отсутствие усадки и деформации после установки
Высокая прочность	> Легкость обрезки и финишной обработки > Снижение риска поломки
Длительное рабочее время	> Безопасное нанесение на всю дугу нижней челюсти
Короткое время отверждения в полости рта	> Быстрая фиксация прикуса
Свежий фруктовый аромат апельсина	> Высокий уровень комфорта для пациента



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

O-Bite

Упаковка:	2 картриджа Кому 50 мл, 12 Automix-Tips	REF 909765
Экономичный набор:	8 картриджа Кому 50 мл, 50 Automix-Tips	REF 909767

Аксессуары:	1 Automix-Dispenser Type 50 10:1 50 Automix-Tips Pink 1:1 50 Conturation-Tips	REF 909507 REF 909202 REF 909203
-------------	---	--

#1_2017-10

DMG
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental



O-Bite

Твердость для оптимальной окклюзии.



Твердость для оптимальной окклюзии. O-Bite.

Идеальная посадка реставраций без утомительной шлифовки.

O-Bite, самостоятельного смешивания А-силиконовый материал от компании DMG для регистрации прикуса с твердостью по шкале Шора-A 95, обеспечивает идеальную посадку реставраций без утомительной шлифовки окклюзионной высоты.

Еще одним преимуществом является разработанная компанией DMG винилсиликоновая матрица, которая, благодаря однородной структуре, придает материалу высокую прочность и максимальную твердость. O-Bite обрабатывается скальпелем или бором для силикона.

Материал обладает фруктовым ароматом апельсина. Многочисленные выдающиеся свойства материала впечатляют даже экспертов. O-Bite получил 4 звезды от независимого испытательного института «Reality» и первое место по оценкам пользователей среди всех протестированных материалов для регистрации прикуса.

ВЫСОЧАЙШАЯ КОНЕЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ


O-Bite с твердостью по шкале Шора-A 94 является самым твердым материалом для регистрации прикуса на основе А-силикона. Высокая окончательная твердость материала особенно важна при переносе зарегистрированного прикуса на модели в артикуляторе с целью гарантированного обеспечения идеальной посадки реставраций.

Более мягкие силиконы изгибаются или сжимаются, препятствуя точной артикуляции. Это может привести к нежелательному завышению прикуса, что требует затратного по времени пришлифовывания. Установка завышенной реставрации может привести к существенному дискомфорту в нижнечелюстном суставе.

Благодаря своей высочайшей твердости O-Bite обеспечивает идеальное гнатологическое соотношение зубов.



ТВЕРДОСТЬ ПО ШКАЛЕ ШОРА-A ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

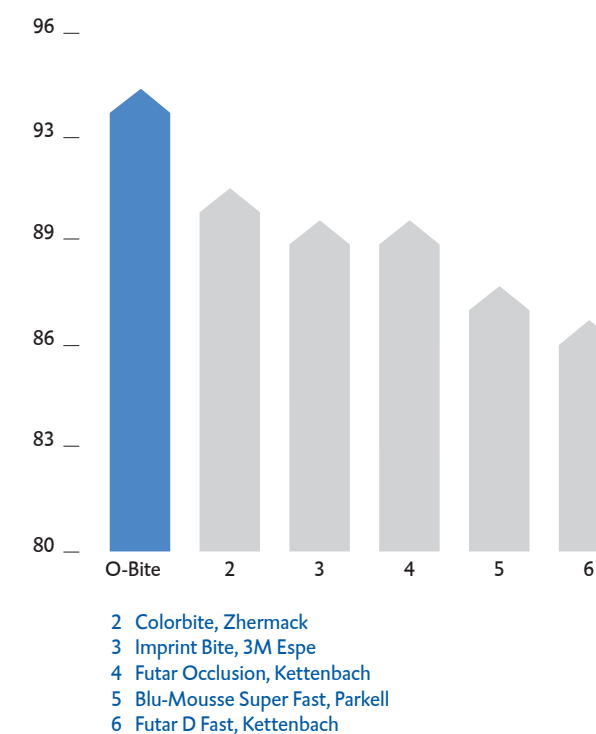


Источник: DMG Внутреннее измерение, data on file 2015

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Благодаря разработанной DMG винилсиликоновой матрице, O-Bite обладает высокой прочностью. Структура материала на основе А-силикона достигается за счет силиконовых цепочек равной длины, которые формируют особо стабильные связи при отверждении.

На практике эта характеристика гарантирует высокое сопротивление излому при извлечении, обработке и репозиции на модели.

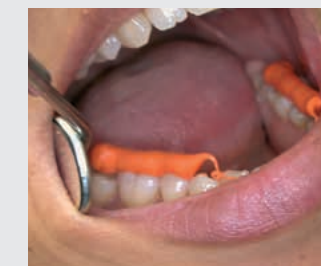


Прямое нанесение O-Bite.



Пациент с желаемой окклюзией.



Регистраторы прикуса перед снятием.

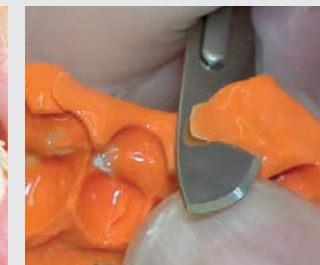

Простая обработка скальпелем или фрезой для силикона.




Нанесение O-Bite на прикусную вилку.



Регистрация с помощью прикусной вилки для верхней дуги.



Лицевая дуга после регистрации прикуса.

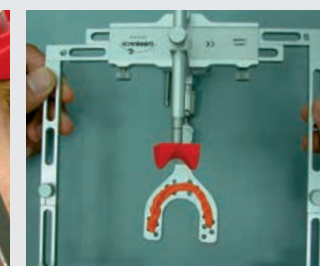

Лицевая дуга с материалом O-bite для переноса в артикулятор.